

VOOR EEN DOELTREFFENDE OPPERVLAKKENDESINFECTIE

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S


Sporicide gebruiksklare reiniger en desinfectans met Hi-speed H₂O₂™

De innovatieve formule van Incidin OxyFoam S & Incidin OxyWipe S is op basis van een gepatenteerde* waterstofperoxide-oplossing met een breed werkingsspectrum.

Werkzaam tegen een breed scala van bacteriën en virussen. Laat geen actieve residuen achter doordat het actieve ingrediënt uiteenvalt in water en zuurstof.

Incidin OxyFoam S & OxyWipe S - kenmerken :

- ▲ Sporicide & virucide wipe
- ▲ Gebaseerd op Hi-speed H₂O₂™
- ▲ Voldoet aan EN 16615 norm
- ▲ CE markering, klasse IIb
- ▲ Actief ingrediënt valt uiteen in water en zuurstof
- ▲ Uitstekende materiaalcompatibiliteit

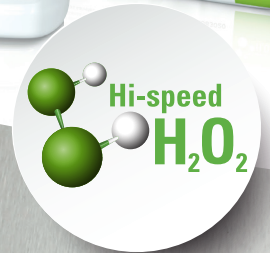

Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S

Sporicide gebruiksklare reiniger en desinfectans met Hi-speed H₂O₂TM



Sporicide werking tegen C.difficile

(SUSPENSIE TEST)



Virucide

(SCHONE CONDITIES)



Bactericide

(EN 13727 / 16615)

Kenmerken	Voordelen
EFFECTIEF	Breed werkingspectrum Korte inwerktijden
VEILIG	Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof Uitstekende materiaalcompatibiliteit
GEMAKKELIJK	Reiniging & desinfectie in één stap Gebruiksklaar

MICROBIOLOGISCHE TESTRESULTATEN

WERKZAAMHEID ONVERDUND	OxyFoam S INWERKTUJD	OxyWipe S INWERKTUJD
Oppervlakken desinfectie volgens VAH methode 2015 (incl. EN 16615), vuile condities		
Bactericide, gisdodend	5 min	15 min
Fungicide	5 min	30 min
Mycobactericide	15 min	30 min
Getest volgens RKI aanbeveling 01/2004* (vuile condities)		
Actief tegen omkapselde virussen volgens RKI aanbeveling 01/2004*	15 sec	30 sec
Adeno*	30 sec	1 min
Polyoma SV40*	30 sec	30 sec
Europese normen (schone en vuile condities)		
EN 13727 (bactericide)	1 min	2 min
EN 13624 (gisdodend)	1 min	15 min
EN 13624 (fungicide)	5 min	30 min
EN 14348 (tuberculocide, mycobactericide)	5 min	30 min
EN 14476 (virucide)	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sec	30 sec
EN 14476 Noro	1 min (schone condities) 15 min (vuile condities)	15 min
EN 13704 (sporicide)**	30 min	60 min
EN 13704 (C. difficile)**	3 min	15 min
Europese normen (vuile condities) - 4 vlakken-test		
EN 16615 (bactericide)	1 min	2 min
EN 16615 (gisdodend)	1 min	1 min
EN 16615 (fungicide)	5 min	5 min
EN 16615 (tuberculocide, mycobactericide)	5 min	5 min
Sporicide (EN 16615 methode)**	15 min	30 min
C. difficile (EN 16615 methode)**	5 min	5 min

INCIDIN OXYFOAM S GEBRUIKSAANWIJZING



- 1 Het product op een afstand van ca. 30 cm op het oppervlak sprayen
- 2 Reinig het oppervlak en zorg voor volledige bevochtiging van het oppervlak
- 3 Laat drogen



- 1 Het product aanbrengen op een schone doek (wipe)
- 2 Reinig het oppervlak en zorg voor volledige bevochtiging van het oppervlak
- 3 Laat drogen

EUROPEAN HEADQUARTERS
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
tel : +41(0)44 877 2001

MICROTEK MEDICAL B.V.
A DIVISION OF ECOLAB
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Nederland
tel : +31 575 599 200

ECOLAB SPRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België
tel : +32 (0)2 467 51 11



**EFFECTIEF.
VEILIG.
GEMAKKELIJK.**

TOEPASSINGSGEBIED

Incidin OxyFoam S : Reiniging en desinfectie foamspray voor medische hulpmiddelen (incl. b.v. probes).

Incidin OxyWipe S : Reiniging en desinfectiedoekjes voor medische hulpmiddelen (incl. b.v. probes).



GEBRUIKSAANWIJZING

Incidin OxyFoam S : Het product op ca. 30 cm afstand op het oppervlak sprayen of aanbrengen op een doekje (wipe). Reinig het oppervlak en zorg voor volledige bevochtiging van het oppervlak vanwege de contacttijd.

Of gebruik het product onverdund op een schone doek, reinig het oppervlak en laat drogen.

Incidin OxyWipe S : Neem één doekje. Bevochtigt het oppervlak en zorg dat het oppervlak volledig bevochtigd wordt. Laten drogen en niet afspoelen. Sluit de verpakking na gebruik.

Niet geschikt voor einddesinfectie van invasieve medische hulpmiddelen.

Niet geschikt voor oppervlakken welke gevoelig zijn voor oxidatieve middelen zoals marmer, koper of messing.

SAMENSTELLING

100g bevat :

Incidin OxyFoam S: 1.5g waterstofperoxyde

Incidin OxyWipe S: 1.5g waterstofperoxyde

VERPAKKING EN BESTEL-INFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKING	REF
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082080
Incidin OxyFoam S	2 x 5 L	3091820
Incidin OxyWipes S	6 x 100 doekjes	3082280

BEWAREN - OPSLAG

Het product moet worden bewaard in de originele verpakking beneden 25°C, op een koele, droge plaats buiten direct zonlicht.

Houdbaarheidsdatum na opening :

Incidin OxyFoam S : tot eind vervaldatum

Incidin OxyWipe S : 3 maanden

References :

1. Incidin OxyFoam S

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.