

MEDISANA®

BU550 CONNECT

Bovenarm bloeddrukmeter

Art.-Nr. 51290 | EAN 40 15588 51290 2

Nauwkeurige bloeddrukmeting aan de bovenarm

Snellere meetresultaten dankzij Inflatetechnologie – de meting start al tijdens het oppompen

Extra grote cijfers en overzichtelijk display

Bluetooth®-dataoverdracht naar VitaDock®-Online en de VitaDock® App (iOS + Android)



VitaDock+ app




Connect met VitaDock® Online

Dankzij de stijlvolle overzichtelijke VitaDock+ app kunt u uw bloeddruk eenvoudig managen met uw smartphone. Evalueren, back-ups en slimme interactieve grafieken helpen u grip op uw gezondheid te houden.

Snellere meetresultaten dankzij inflate-technologie

De bloeddruk wordt gemeten tijdens het oppompen, waardoor de meting sneller kan starten dan bij traditionele metingen. Hierdoor wordt de manchet niet onnodig ver opgepompt en zijn de resultaten direct beschikbaar.

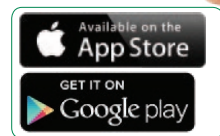

Kleurcode WHO



Opslagplaatsen



Groot display



EU-gecertificeerd



Klinisch getest



Jaar garantie



Functies | Gebruik

Nauwkeurige bloeddrukmeting aan de bovenarm

Snellere meetresultaten dankzij Inflatetechnologie – de meting start al tijdens het oppompen van de manchet

Display toont systole, diastole, hartslag, datum, en tijd

LCD display met helder blauwe achtergrondverlichting

Aritmie-herkenning

Diagnose volgens de richtlijnen van de WHO* d.m.v. een kleurschaal

500 geheugenplaatsen voor elk van de 2 gebruikers

Berekening gemiddelde van de laatste 3 metingen

Gastmeting mogelijk zonder opslag van de gemeten waarden

Goed leesbaar display dankzij extra grote cijfers

Bluetooth Smart dataverbinding met VitaDock+ app voor iOS (6.0 en nieuwer) en Android (4.3 en nieuwer) en VitaDock Online**

Aansluitmogelijkheid voor adapter (los verkrijgbaar)

Inclusief opbergetui

Gecertificeerde bloeddrukmeter naar strenge EU-richtlijnen***

Technische data

Afmeting: ca. 90 x 140 x 33 mm

Gewicht: ca. 350 gram

Meetmethode: oscillometrisch

Meetbereik:

Bloeddruk: 0 – 300 mmHg

Hartslag: 40 – 199 slagen/min.

Batterijen: 4 x AAA

Inhoud

BU 550 CONNECT

Manchet voor bovenarmomvang 22-32 cm

Batterijen

Opbergetui

Logistieke data

Verkoopverpakking

1 Stuk | 9 x 14 x 3,3 cm | 0,35 Kg

VPE

4 Stuks | tbd | tbd

* World Health Organisation (Wereldgezondheidsorganisatie)

** Bluetooth® 4.0 smart compatible

***Gecertificeerd volgens MDD (Medical Device Directive)