

NEW
CARA



CARA

L'avenir bien en face.



CARA prend soin de vous.

L'ajustement compliqué, c'est du passé. Il faut que la manipulation du masque soit des plus simples. Ça vous parle ?

Les masques de Löwenstein Medical Technology vous offrent ces avantages depuis des années. Nous passons désormais la vitesse supérieure : CARA perfectionne ce qui est éprouvé en modernisant l'ensemble.

CARA vous convaincra car il est léger et dispose d'une jupe épousant parfaitement la forme du visage, d'une petite fuite intentionnelle silencieuse et diffuse ainsi que de nombreux autres détails qui facilitent la vie.

Les avantages de CARA

- Jupe du masque douce et souple en seulement 2 tailles
- Poids plume de seulement 59 grammes
- Petite fuite intentionnelle silencieuse et diffuse ¹
- Code couleur du harnais avec EasyGrab et attaches intuitives ²
- Rotule 369°-3D pour une plus grande liberté de mouvement ³
- Matériaux extrêmement résistants

CARA - Made in Germany

Deux tailles – une décision

La première impression ne trompe pas. La jupe du masque est douce et souple. Elle épouse parfaitement la forme du visage, quelle que soit la taille du nez, rendant ainsi inutile l'utilisation d'un coussinet frontal.

Vous choisissez l'une des deux jupes qui se fixent sur le même cadre de masque. La jupe standard S/M convient à environ 65% des patients. Pour un nez plus long, utilisez la taille M/L.

Incroyablement silencieux

La fuite intentionnelle à fentes placée près de la rotule articulée est éprouvée depuis des décennies. Nous avons réussi à la perfectionner.

L'évacuation de l'air est toujours diffuse pour ne déranger ni le patient ni son conjoint et la partie supérieure est toujours fermée pour éviter que le flux d'air n'atteigne les yeux.

CARA est tellement silencieux que même le tictac d'une montre fait plus de bruit.

CARA est écolo

CARA pense écolo. Il est fabriqué avec moins de matériaux qui sont tous recyclables et les sangles du harnais sont certifiées Oeko-Tex Standard 100.

Conserver ce qui est éprouvé

La rotule articulée 360°- 3D assure une liberté de mouvement illimitée pendant toute la nuit sans que CARA ne bouge de place.

Des détails qui facilitent la vie

La jupe s'encastre dans le cadre du masque sans aucune confusion possible.

La mise en place du harnais est également très intuitive. Les bandes auto-agrippantes bleu pétrole sont toujours en haut. EasyGrab facilite en outre la manipulation des bandes auto-agrippantes.

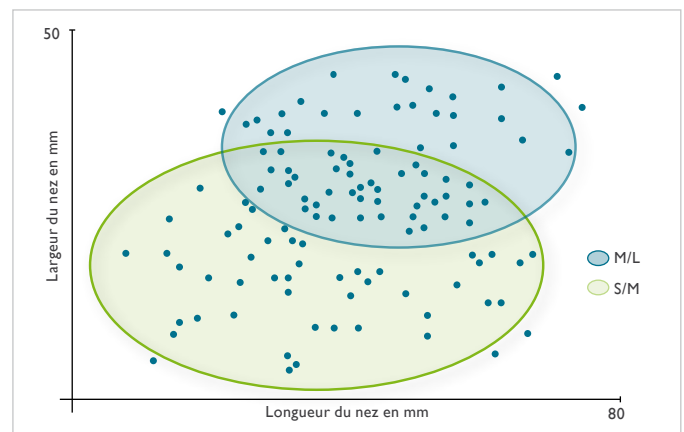


Fig. : Répartition des dimensions des jupes du masque CARA

Mise en place de CARA.



- Défaites d'abord les deux attaches du masque.
- Enfillez le harnais sur votre tête.
- Fixez les deux attaches du harnais au masque.
- Ajustez les bandes auto-agrippantes supérieures en évitant qu'elles ne soient trop serrées.
- Ajustez ensuite les bandes auto-agrippantes inférieures en évitant qu'elles ne soient trop serrées.

Notre vidéo utilisateur est disponible sur YouTube sous www.youtube.com

Pièces de rechange

Harnais CARA
avec attaches
WM 25233



Jupes du masque

Taille S/M
WM 25238

Taille M/L
WM 25239



Caractéristiques techniques

	Taille S/M	Taille M/L
Classe de produit selon 93 / 42 / CEE	II a	
Dimensions (l x h x p)	72 x 115 x 89 mm	
Poids	59 g	60 g
Raccord conique selon EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (mâle)	
Températures limites	+5 °C à +40 °C	
• Fonctionnement :	-20 °C à +70 °C	
• Entreposage :		
Résistance à l'écoulement		
• pour 50 l/min	0,02 hPa	
• pour 100 l/min	0,3 hPa	
Déclaration de deux valeurs d'émission sonore selon ISO 4871 :		
• Niveau de pression acoustique :	18 dB(A)	
• Niveau de puissance acoustique :	23 dB(A)	
• Incertitude de mesure :	3 dB(A)	
Durée d'utilisation	jusqu'à 12 mois ¹	
Normes appliquées	EN ISO 17510-2:2009	

¹ Les matériaux, utilisés pour la fabrication de masques, s'usent, en particulier quand ils sont nettoyés avec des détergents agressifs. Dans certains cas, il sera donc nécessaire de remplacer plus tôt certaines pièces du masque.

Masque	Taille	Référence
CARA Nasal	S/M	WM 25600
CARA Nasal	M/L	WM 25610

CE 0197

Retrouvez notre gamme complète de solutions, interfaces patient et accessoires sur le site loewensteinmedical.de

Löwenstein Médical France
Z.I. 5 Rue Lavoisier, 91430 Igny
France
T : +33 | 693553-35
F : +33 | 694139-00
info@loewensteinmedical.fr
www.loewensteinmedical.fr

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg
Allemagne
T : +49 40 547 02 0
F : +49 40 547 02 461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

LÖWENSTEIN
medical

