


Welch Allyn

## ABPM 7100

Uitgebreide bloeddrukbewaking  
waarbij het comfort van  
de patiënt voorop staat

**WelchAllyn**<sup>®</sup>

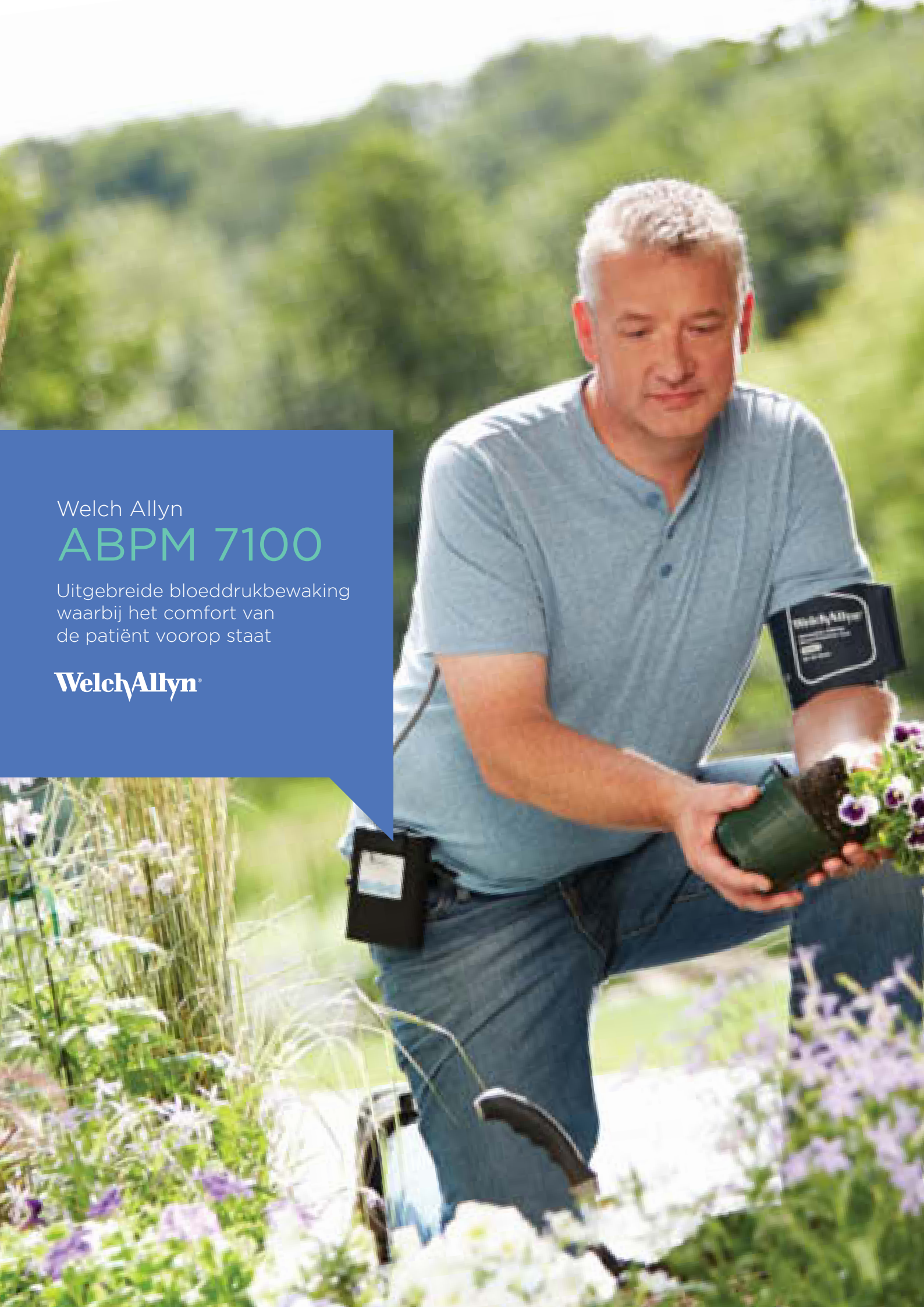



## BETERE THERAPEUTISCHE BESLISSINGEN MAKEN DANKZIJ EEN UITGEBREIDE BLOEDDRUKANALYSE



De Welch Allyn ABPM 7100 is een 24-uurs bloeddrukmeter voor de ambulante zorg die gemakkelijk in gebruik is en bedoeld is om een verhoogde bloeddruk als gevolg van het 'wittejasseneffect' te voorkomen en nauwkeurige gegevens te verschaffen waarmee u nauwkeurige metingen tijdens de slaap kunt doen en medicatieschema's op de behoeften van elke afzonderlijke patiënt kunt afstemmen. Met behulp van krachtige Windows®-software kunt u bloeddrukmetingen effectiever analyseren waardoor mogelijke complicaties bij patiënten sneller kunnen worden gediagnosticeerd. Dankzij deze kenmerken bent u met de ABPM 7100 beter in staat de bloeddruk van uw patiënten te beheren en efficiënt in uw praktijk te bewaken.



### KENMERKEN EN VOORDELEN

- Een groot aantal protocollen waarmee u meetperioden en inflatiefrequenties kunt programmeren conform de onderzoeksdoelen
- Maakt gebruik van oscillometrietechnologie: de meest erkende en geteste methode voor automatische NIBP-metingen
- De Auto Feedback Logic-functie tijdens inflatie leidt tot een uitstekend comfort en goede verdraagzaamheid bij de patiënt
- Licht in gewicht, compact en geruisloos voor een betere naleving door de patiënt
- Manchetten die geen latex bevatten, zodat de kans op allergische reacties van de patiënt wordt verkleind
- Voldoet aan of overtreft de meest recente AAMI- en EHS-normen, en heeft een BHS A/A-klassering
- Bevat Welch Allyn CardioPerfect®-werkstationssoftware
- Mogelijkheid tot upgraden zodat nieuwe functies, inclusief centrale bloeddruk en pulsolfanalyse (arteriële stijfheid), kunnen worden toegevoegd

## Beschikbare upgrade: Pulsgolfanalyse (PWA) en centrale bloeddruk

Onderzoek toont aan dat het meten van zowel de pulsgolfsnelheid in de aorta als de centrale bloeddruk een betere indicatie geeft van een mogelijke hartaanval of beroerte dan een meting van alleen de bloeddruk aan de bovenarm. Met de Welch Allyn ABPM 7100 met PWA en centrale bloeddruk kunnen beide meettechnieken met één apparaat worden uitgevoerd, waardoor u een cardiovasculair risico en eventuele subklinische orgaanbeschadigingen nauwkeuriger kunt detecteren.

*Blood Pressure & Pulse Wave Measurement combined in one procedure Re-classification of risk patients: I.E.M. GmbH, 52222 Stolberg, Duitsland.*

Met de gegevensoutput van de Welch Allyn ABPM 7100 kunt u eenvoudig de door u gewenste rapporten maken, afdrukken en aanpassen:



Welch Allyn  
CardioPerfect-  
werkstationsoftware



1. Statistische overzichten voor systolische-, pols- en gemiddelde arteriële druk en hartfrequentie, inclusief minimum- en maximumwaarden, gemiddelden en standaarddeviaties




2. Grafieken van het bloeddrukprofiel, inclusief 24-uurs taartdiagrammen, histogrammen en correlatiegrafieken, en een aparte weergave van dag- en nachtmetingen



3. Bewerkbaar verslag met tabellen voor gedetailleerde analyse



4. Trending-tool voor evaluatie en medicijnbeheer op de lange termijn

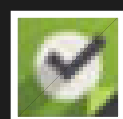




5. Overzichtswaergave

## Welch Allyn CardioPerfect®-werkstationsoftware



### *Krachtige software die het beheren van gegevens eenvoudiger maakt*

De Welch Allyn ABPM 7100 maakt deel uit van het CardioPerfect-werkstationsoftwarepakket. Met de software worden gegevens uit de ABPM 7100 en andere cardiopulmonale apparaten van Welch Allyn op dezelfde wijze beheerd, waardoor u alle patiëntgegevens in één record kunt opslaan, terwijl papierloze efficiency en connectiviteit worden gehandhaafd. Hierdoor kunt u de informatie snel ophalen en analyseren, waarbij u kostbare tijd wint die u aan patiëntcontact en -zorg kunt besteden. Als u eenmaal klaar bent voor een elektronisch patiëntendossier (EMR) kunt u de patiënt- en onderzoeksgegevens via een eenvoudige elektronische interface gemakkelijk overzetten naar verschillende EMR-systemen.

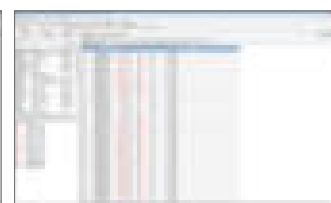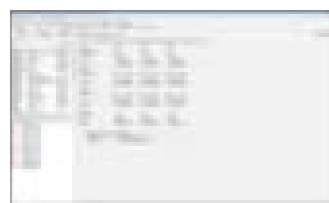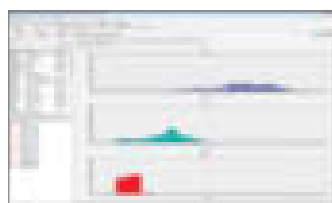

### BESTELINFORMATIE

#### Apparaten

ABPM 7100	ABPM 7100-recorder
ABPM 7100S	ABPM 7100-recorder, inclusief CardioPerfect®-werkstationsoftware

#### Accessoires

7100-21	ABPM 7100-tas en schouderband
7100-24	ABPM 7100-USB-interfacekabel
REUSE-09-ABPM	ABPM-manchet kinderen: 14 - 20 cm
REUSE-10-ABPM	ABPM-manchet kleine volwassenen: 20 - 24 cm
REUSE-11-ABPM	ABPM-manchet volwassenen: 24 - 32 cm
REUSE-11L-ABPM	ABPM-manchet volwassenen Plus: 32 - 38 cm
REUSE-12-ABPM	ABPM-manchet XL: 38 - 55 cm
REUSE-091012-ABPM	Set kleine manchetten (maten 09, 10 en 12)
REUSE-ALL-ABPM	Set met alle 5 manchetten

Neem voor meer informatie of voor het inplannen van een demonstratie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Welch Allyn.

Welch Allyn EMEA&I Headquarters  
Dellaertweg 9d, 2316 WZ Leiden  
The Netherlands  
Tel: +3171 525 5000 Fax: +3171 525 5050

[WWW.WELCHALLYN.COM](http://WWW.WELCHALLYN.COM)

**WelchAllyn®**