



Turboneb

appareil à aérosols

nv HENROTECH sa

T : 03 / 844.53.33

F : 03 / 844.52.13

e : respircenter@henrotech.be

http : www.henrotech.be




L' Turboneb est conçu pour le travail continu, c'est un nébuliseur à fonctionnement à froid pour le travail exigeant. Cette machine robuste et fiable satisfait idéalement aux exigences posées pour l'utilisation en hôpitaux et cliniques , ainsi que pour l'utilisation à domicile. Son design attractif, sa facilité d'utilisation en font un appareil fort préféré par les patients de toutes catégories d'âge.

L' Turboneb donne un haut débit et est donc approprié pour la nébulisation de broncho-dilatateurs (curatifs), corticostéroïdes (prévention) et antibiotiques.

Les set de nébulisation jetables Medix, inclus dans la fourniture, donnent une nébulisation rapide et efficace de médication. Ces nébuliseurs jetables de type jet sont conçus pour la nébulisation rapide de petits volumes de médicaments liquides, en position horizontale jusqu' à 45°, aussi bien que verticale. La conception unique de la chambre de médication conique garantit une nébulisation à grosse production et un résidu fort petit.

Ces nébulisateurs sont utilisés pour la thérapie inhalatoire dans les cas de Mucoviscidose (Cystic Fibrosis), COPD et Asthme et sont appropriés pour la nébulisation de divers médicaments avec ou sans NaCl (solution saline physiologique). Ils sont utilisables avec l'air comprimé/oxygène du réseau mural ou de bouteilles, ainsi qu'avec divers compresseurs. Ces nébuliseurs peuvent être équipés d'embouts ou de divers masques.

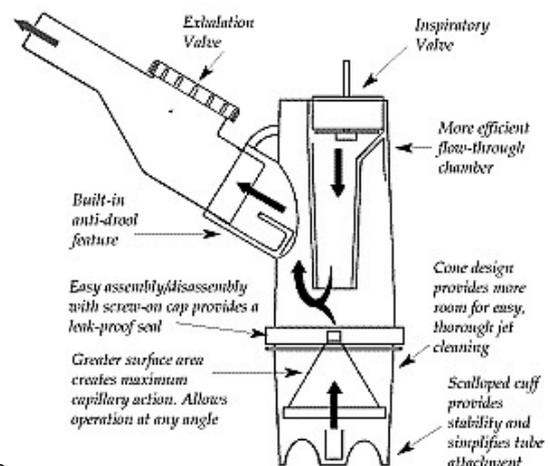

Caractéristiques:

- convient aussi pour utilisation continue
- compresseur fiable de haute qualité
- raccordement aisé
- construction robuste (location)
- utilisation facile
- nettoyage aisé
- pourvu d'un filtre d'entrée et d'un filtre de sortie
- 3 ans de garantie

Spécifications:

dimensions	210 x 185 x 185mm
poids	2.70 kg
alimentation électrique	220-240V AC (50Hz)
débit dynamique & pression	10,50 L/min @ 20 psi / 1,38 bar
diamètre des particules	MMAD 2,8 μ m ²
durée de nébulisation	2 - 5 minutes pour 2.5 ml
% particules < 5 μ m	81 % ²
sécurité	sécurité électrique Classe II Type BF CE 0120 Classe IIa MDD 93/42/EEC



set de nébulisation Medix avec masque enfant ou adulte



Ultraset Medix à soupapes

Le nébulisateur Ultraset est pourvu d'un système de soupapes révolutionnaire, donnant une très haute concentration de médication par inspiration (production maximale avec valeurs MMAD correctes). Puisque l'Ultraset est pourvu d'un système unidirectionnel de soupapes, il résulte un résidu minimal. Par ailleurs le nébulisateur est silencieux.