



Turboneb

aërosolapparaat

nv HENROTECH sa

T : 03 / 844.53.33

F : 03 / 844.52.13

e : respircenter@henrotech.be

http : www.henrotech.be




De Turboneb is ontworpen voor continue werking, het is een koelwerkende vernevelaar voor veeleisend werk. Deze betrouwbare en robuuste machine voldoet ideaal aan de eisen voor gebruik in ziekenhuizen of klinieken, alsook voor thuisgebruik.

Met zijn aantrekkelijke design, gemakkelijk te gebruiken is hij een populair bij alle leeftijdsgroepen van patienten.

De Turboneb geeft een hoge debiet en is dus geschikt voor het vernevelen van broncho-dilatoren (relievers), corticosteroïden (preventers) en antibiotica. De bijhorende Medix wegwerp aërosolsets geven een snelle en doeltreffende medicatieafgifte. Deze wegwerp jet vernevelaars zijn ontworpen om kleine volumes vloeibare medicamenten te vernevelen in een kort tijdsbestek in zowel horizontale tot 45°, als in verticale positie. Het unieke design met kegelvormige medicijn-kamer garandeert een verneveling met een hoge output en met een uiterst klein residu.

De vernevelaars worden gebruikt ten behoeve van inhalatietherapie bij Mucoviscidose (Cystic Fibrosis), COPD en Astma en is geschikt voor verneveling van diverse medicijnen met of zonder NaCl (fysiologisch zoutoplossing). Ze zijn te gebruiken bij perslucht / zuurstof uit muur of fles en op diverse compressors. De vernevelaars zijn uit te rusten met mondstuk of diverse maskers.

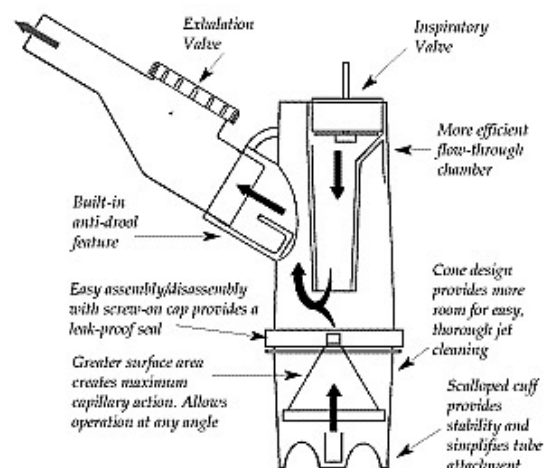

Kenmerken:

- kan continu gebruikt worden
- zeer betrouwbare hoge kwaliteits kompressor
- handige aansluiting
- sterke constructie (verhuur)
- gebruiksvriendelijk
- gemakkelijk te reinigen
- heeft een in- en uitlaatfilter
- 3 jaar garantie

Specificaties:

afmetingen	210 x 185 x 185mm
gewicht	2.70 kg
electrische voeding	220-240V AC (50Hz)
nominale dynamisch debiet & druk	10,50 L/min @ 20 psi/1,38 bar
partikel grootte	MMAD 2,8µm
verneveltijd	2 - 5 minuten voor 2.5ml
% partikels < 5µm	81.1% ²
veiligheid	Electrische veiligheid Classe II Type BF CE 0120 Classe IIa MDD 93/42/EEC



Medix vernevelset met masker kind of volwassen



Medix ultraset met kleppen

De Ultraset vernevelaar is voorzien van een revolutionair kleppensysteem, dat zorgt voor een zeer hoge concentratie aan medicamenten per inademing (maximale output met een correcte MMAD waarde). Doordat de Ultraset voorzien is van een éénrichtingskleppensysteem wordt een minimum aan residu bereikt. De vernevelaar is bovendien geruisarm.